

**HOLITY.COM**

## Toilettensitz mit abklappbaren Armlehnen h8907

Erhöhte Toilette fest montierte passend für alle gängigen Arten von Wasser. Mit einem Deckel und Armlehnen und abnehmbar. Einstellbar auf drei Höhen

Der Toilettenlifter wurde in Übereinstimmung mit der technischen Dokumentation und den folgenden EWG-Vorschriften gebaut: Richtlinie 93/42/EWG des Rates vom 14. Juni 1993, Anhang I, über Medizinprodukte. Er ist fest montiert und besteht aus rostfreiem, leicht zu reinigendem Material.

Er ist auf 3 verschiedene Höhen/Leisten einstellbar und passt auf alle Standardtoiletten, d.h. auch auf ovale Toiletten. Er wird einfach an der Toilettenschüssel befestigt, indem man ihn an den Löchern für den Originaldeckel anbringt. Die Armlehnen lassen sich ohne Werkzeug verstellen und abnehmen.

### Technische Daten:

- Für Oval-Toiletten
- Mit Deckel
- Kippbare und abnehmbare Armlehnen
- Gesamtbreite: 59 cm
- Gesamttiefe: 47,5 cm
- Höhenverstellbar: 6 cm, 10 cm, 15 cm
- Maximale Belastbarkeit: 120 kg

### Montage

- den Standarddeckel von der Toilette abnehmen
- Passen Sie die beiden Gewindeschrauben an die Breite der Toilettenlöcher an
- Befestigen Sie den Toilettensitz an der Toilette, indem Sie die beiden Kunststoffknöpfe an den Durchgangsschrauben festziehen
- Stecken Sie die Armlehnen in die Löcher auf der linken und rechten Seite des Toilettensitzes und halten Sie dabei die Verriegelungskammern fest.

### Höhenverstellung


- Entfernen Sie die Kunststoffstopfen aus den Löchern, die Sie verwenden möchten

- die 2 Schraubknöpfe abschrauben und entfernen, die hintere Stützstange intern auf die gewünschte Höhe verschieben und mit den beiden Knöpfen wieder befestigen
- Entfernen Sie die vordere Teleskopstange und stellen Sie sie auf die gleiche Höhe wie die hintere Stange ein. Entfernen Sie dazu die beiden Clips an den Seiten der Stange, stellen Sie die Länge der Stange ein und befestigen Sie sie mit den Clips wieder.
- Setzen Sie die vordere Leiste wieder in ihren Schlitz im Gitter ein.
- die Schrauben der Stützstifte mit den mitgelieferten Kunststoffstopfen abdecken

## INFORMATIONEN


- **Höhe** einstellbar
- **Breite** 36 cm
- **Tiefe** 47,5 cm
- **Tragfähigkeit** 120 kg
- **Material** PVC

## Toilettensitz mit abklappbaren Armlehnen h8907

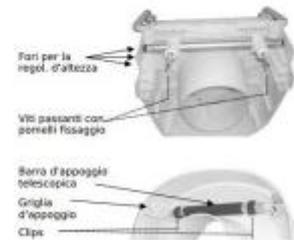

## Toilettensitz mit abklappbaren Armlehnen h8907

Höhe: regulabile  
Tragfähigkeit: 120 kg

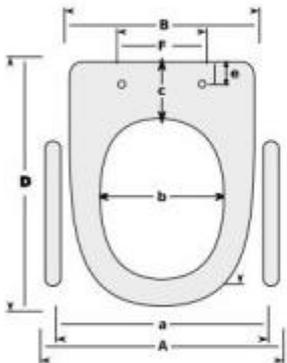

misura	
D	47,5 cm
d	27 cm
B	42,5 cm
b	22 cm
F	3,5 - 33 cm
c	9 cm
e	0 o 4 cm
a	51 cm
A	59 cm