



Gynäkologische Untersuchungsliege h728_06

Gynäkologische Untersuchungsliege mit lackiertem Stahlgestell, verstellbarer Rückenlehne und Beinstütze, abklappbaren Armlehnen, Flüssigkeitsauffangschale und gynäkologischem Ausschnitt. Feste Höhe 80 cm, Tragkraft 180 kg.

Spezialisierte Untersuchungsliege für gynäkologische Abteilungen und Praxen, konzipiert zur Unterstützung klinischer Untersuchungen und geburtshilflicher Verfahren. Das Gestell mit fester Höhe garantiert operative Stabilität, mit einem weiß lackierten Stahlrahmen und verstellbaren Füßen zum Ausgleich von Bodenunebenheiten. Die mit hochdichtem Schaumstoff (30 kg/m³) gepolsterte Liegefläche ist mit feuerfestem Vinyl der Klasse 1IM bezogen, was Patientenkomfort und die Einhaltung von Brandschutzvorschriften gewährleistet.

Verstellbarkeit und Ergonomie: Rückenlehne und Beinstütze werden manuell per Hebel bedient, um sie an verschiedene klinische Positionen anzupassen. Die um 90° abklappbaren Armlehnen erleichtern den seitlichen Zugang, während die drehbaren und verstellbaren Beinstützen eine physiologische Positionierung für die gynäkologische Untersuchung ermöglichen.

Integrierte Ausstattung: Eine ausziehbare Edelstahlschale zum Auffangen biologischer Flüssigkeiten, ein ergonomisches Kissen zur Unterstützung der Rückenlehne und ein gynäkologischer Ausschnitt in der Sitzfläche vervollständigen die klinische Konfiguration.

Technische Merkmale

- Abmessungen: L.175 x B.56 x H.80 cm
- Höhe: fest 80 cm
- Maximale Tragkraft: 180 kg
- Rahmen: Stahl mit Epoxidbeschichtung und weißer Lackierung
- Bezug: 100% feuerfestes Vinyl Klasse 1IM
- Polsterung: 5 cm Schaumstoff, Dichte 30 kg/m³
- Rückenlehne und Beinstütze: manuelle Verstellung mittels Hebel
- Armlehnen: um 90° abklappbar
- Beinstützen: drehbar und verstellbar
- Flüssigkeitsauffangschale: Edelstahl, ausziehbar
- Zubehör: ergonomisches Kissen für die Rückenlehne, gynäkologischer Ausschnitt in der Sitzfläche
- Füße: verstellbar
- Verfügbare Farben: vielfältige Optionen für die Liegefläche
- Zertifizierung: CE-Kennzeichnung

Reinigungs- und Desinfektionsanweisungen

- **Verbotene Lösungsmittel:** Verwenden Sie keine Seifen, Lösungen mit Alkohol, Ketonen, Xylol, Acetaten oder organischen Lösungsmitteln auf dem Bezug
- **Reinigungsverfahren:** Mit einem weichen, feuchten Baumwolltuch abwischen; anschließend mit einem in Wasser und neutraler Flüssigseife getränkten Tuch reinigen; mit klarem Wasser abspülen und trocknen
- **Verbotene Materialien:** Verwenden Sie keine Bürsten mit Borsten oder Schwämme aus Scheuer- oder Metallfasern, da diese dauerhafte Schäden am Gewebe verursachen können

- **Set:** drehbare gynäkologische Beinstützen


Abbildung rein indikativ

INFORMATIONEN

- **Länge in mm** 1750.000000
- **Tiefe in mm** 560.000000
- **Höhe in mm** 800.000000
- **Höhenart** fest
- **Tragfähigkeit** 180 kg

HOLITY.COM

Gynäkologische Untersuchungsliege h728_06

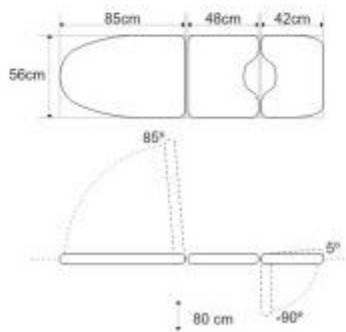

Gynäkologische Untersuchung

Tragfähigkeit: 180 kg

Typologie höhe: fest