



## Transportliege für Krankenhaus h728\_10

Krankentransportliege für den Patiententransport. Höhenverstellbar durch Hydraulikmotor. Abmessungen: L.190 x T.62 x H.59/109 cm.

Transportliege für Krankenhäuser, Kliniken, Pflegeheime. Perfekt für den Transport von Patienten in Operationssälen und verschiedenen Krankenhausabteilungen. Bestehend aus einem 2-teiligen schaumstoffgepolsterten Oberfläche mit feuerfestem Vinylbezug und einem lackierten Stahlrahmen. Die Kopfstütze ist mit einem Gesichtsatemloch mit Kappe ausgestattet, um maximalen Patientenkomfort zu gewährleisten. Der Rahmen hat einklappbare Seitenschiene an den Seiten für zusätzliche Sicherheit beim Transport. Die Höhe des Rahmens kann mit Hilfe eines Hydraulikmotors verstellt werden, während die Rückenlehne manuell mit einem Hebel verstellbar ist. Die Liege ist außerdem mit komfortablen Schiebegriffen an der Kopf- und Fußseite, einem Sauerstoffflaschenhalter und einem Infusionsständer ausgestattet. Die Basis hat 4 Räder, von denen 2 gebremst sind und 1 eine Richtungsbremse hat.

### Technische Eigenschaften:


- Abmessungen: L.190 x T.62 x H.59/109 cm
- Tragfähigkeit: 180 kg
- Gestellmaterial: Stahl mit Epoxidbeschichtung und weißer Farbe
- Futtermaterial: 100% Vinyl
- Feuerhemmende Beschichtung Klasse 1IM
- Schaumstoffpolsterung 5 cm, 30 kg/m<sup>3</sup>
- Hydraulischer 1-Motor-Antrieb zur Höhenverstellung
- Verstellbare Rückenlehne mit Hebel
- Gesichtslöcher mit Kappe
- 2 Schiebegriffe (Fuß- und Kopfseite)
- Klappbare Seitengitter
- Sauerstoffflaschenhalterung
- Infusionsständer
- Räder Ø 125 mm, 1 mit Richtungsbremse, 1 ohne Bremse und 2 mit Bremse
- Oberfläche in verschiedenen Farben erhältlich
- Zertifizierte Kennzeichnung

N.B: Verwenden Sie KEINE Seifen oder Lösungen, die Alkohol, Ketone, Xylol, Acetate oder Lösungsmittel enthalten, um die Oberfläche zu reinigen und zu desinfizieren. Wischen Sie Flecken zuerst mit einem feuchten, weichen Baumwolltuch ab, dann mit einem in Wasser und neutraler Flüssigseife getränkten Tuch, und schließlich nur mit Wasser und trocken ab. Verwenden Sie KEINE Bürsten mit Scheuer- oder Metallfaserborsten oder Schwämme, da diese den Stoff dauerhaft beschädigen können.

- Höhe in mm 50.0000
- Länge in mm 50.0000
- Tiefe in mm 50.0000
- Typologie verstellbare Höhe

# HOLITY.COM

## Transportliege für Krankenhaus h728\_10

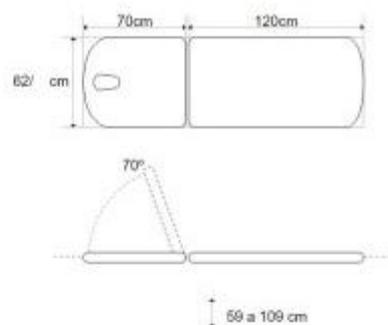

HOLITY.COM

## Transportliege für Krankenhaus h728\_10

- Höhe in mm: 399 mm  
 Länge in mm: 407 mm  
 Tiefe in mm: 400 mm  
 Typologie: verstellbare Höhe